

## NARCOBIT-E (Ⅱ型)

大好評



KN-1071-I  
イソフルラン用



KN-1071-S  
セボフルラン用

### ● 対象動物

マウス・ラットなど、実験用小動物が主な対象です。

### ● 使用麻醉薬

イソフルラン及びセボフルランからお選び頂けます。 \*いずれかの麻醉薬専用の麻醉装置になります。

### ● 使用ガス

空気(エアープンプ内臓)を使用しますので、電源があれば、どこでもお使いいただけます。

また、酸素濃度を上げたい場合はKN-1061「酸素添加ユニット」で調整が可能です。 \*個別カタログがございます。

### ● 複数匹の同時維持

周辺機器を組み合わせて頂くことで、マウスで1~10匹, ラットで1~8匹程度まで対応可能です。

### ● 必要な機能を、必要なだけ

各部の見直しにより、従来製品より、さらなるコストダウンを実現しました。

周辺機器を豊富に準備しておりますので、さまざまなご要望に対応致します。

主な仕様	本体サイズ	W175×D145×H360mm
	本体重量	約7.7kg (カラフロメーターは除く)
	気化器	イソフルラン用またはセボフルラン用 (いずれかの麻醉薬専用)
	流量	導入麻醉ボックス側：約5ℓ/min <sup>*1</sup> 維持麻醉マスク側：~1.0ℓ/min <sup>*2</sup>
	電源	AC100V
	付属品 <sup>*3</sup>	KN-1013-1 カラフロメーター 1ℓ型×1個 (維持麻醉マスクの流量コントロール用)



\*1: 導入麻醉ボックスへ麻醉ガスを満たすことが可能です。


流量調整をご希望の場合は、導入麻醉ボックス側へ KN-1013-5 カラフロメーター (5ℓ型) ×1個 (別売) をご用意しております。

\*2: 本機には、維持麻醉マスク側用として1個のカラフロメーターが附属しています。

複数匹の維持麻醉の場合には、維持匹数分のカラフロメーターが必要です。

\*3: その他に、導入麻醉ボックス等が別途必要になります(別売)。「吸入麻醉装置関連製品」カタログをご用意しております。

# KN-1071 NARCOBIT-E (II型) 関連製品の接続について

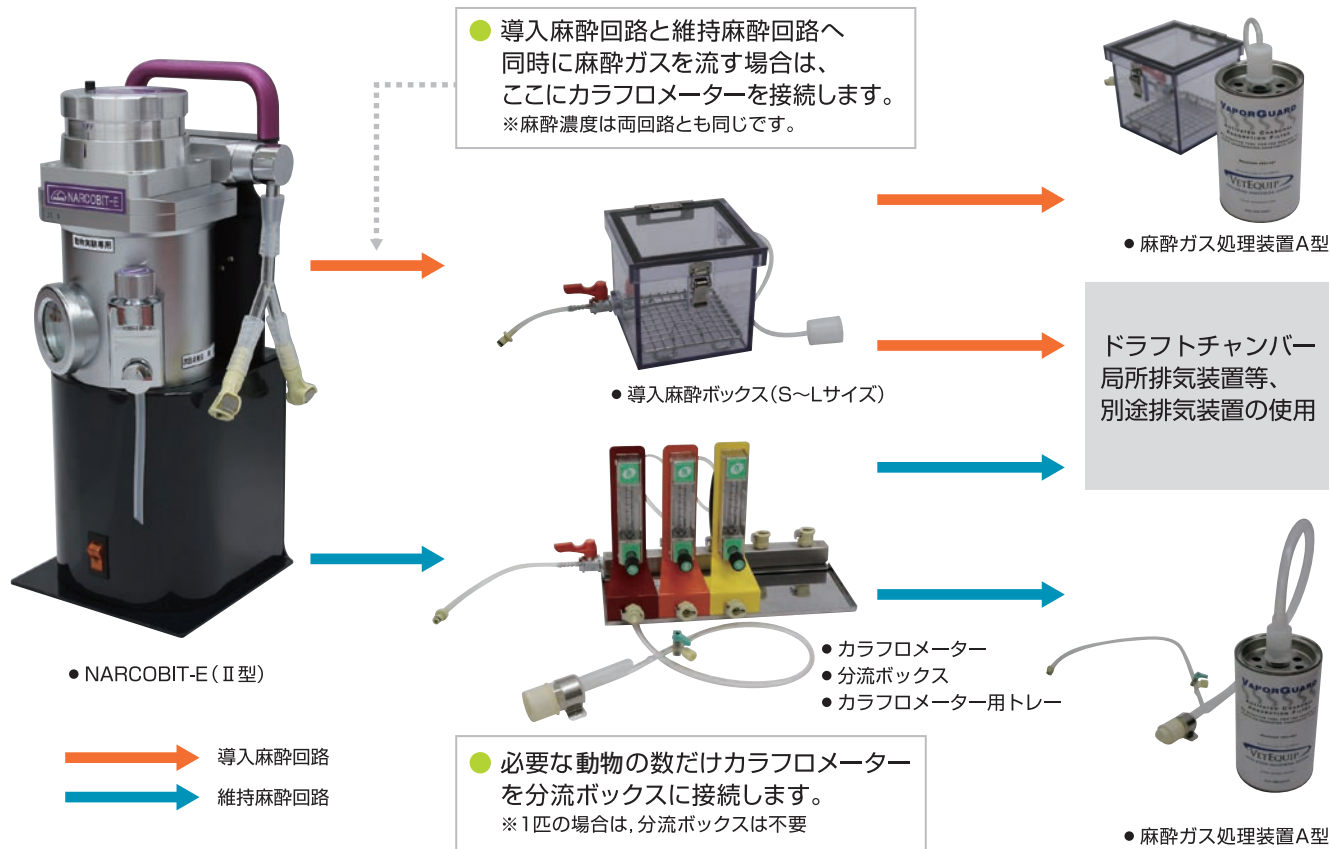

## ■ セット例 (単匹用)



### 使用製品

1. KN-1071 NARCOBIT-E (II型)
2. KN-1010 導入麻酔ボックスセット
3. KN-1013 カラフロメーター
4. KN-1019 夏目式麻酔マスク
5. KN-1050 麻酔ガス処理装置A型

※詳細につきましては、「吸入麻酔装置関連製品」カタログおよび各製品の個別カタログを用意しております。お問合せ下さい。

## ■ セット例 (複数匹用)



### 使用製品

1. KN-1071 NARCOBIT-E (II型)
2. KN-1010 導入麻酔ボックスセット
3. KN-1013 カラフロメーター
4. KN-1013-B5 分流ボックス
5. KN-1013-T5 カラフロメーター用トレー
6. KN-1013-ST 麻酔ボックス収容スタンド
7. KN-1019 夏目式麻酔マスク
8. KN-1050 麻酔ガス処理装置A型

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせください：

「対象動物 (マウス?ラット?)」「同時に麻酔をする匹数は?」「導入麻酔と維持麻酔の同時使用の有無」を、お知らせください。関連製品を含めた「麻酔装置」のご提案をさせていただきます。



株式会社 夏目製作所

理化学器械/基礎医学器械/薬学研究器械  
実験動物飼育管理機器/医科器械一般

本社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6  
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002  
HP: <http://www.nazme.co.jp/>

大阪支社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18  
彩都バイオヒルズセンター3F  
TEL:072-646-9311 FAX:072-646-9300